

MESOBIO LIFT RF

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ANTIAGING



TECNOLOGÍA BIO-REPARADORA

PARA LA REAFIRMACIÓN, REDENSIFICACIÓN Y DESCONGESTIÓN DE LA PIEL Y LOS TEJIDOS. INNOVACIÓN Y EFICACIA PROBADA PARA SUS TRATAMIENTOS FACIALES Y CORPORALES.

RÖS'S

Tecnología estética avanzada



reafirma

reafirma

RÖS'S Estética, empresa líder en la fabricación europea de aparatología estética, incorpora a su familia tecnológica MESOBIOLIFT RF, el equipo más avanzado de su gama en tratamientos antiaging. Su mecanismo reparador estimula las células de todos los estratos cutáneos, activando su capacidad auto-regeneradora. De esta acción intracelular, resulta la reconstrucción de la red bio-redensificadora que da sujeción a nuestros tejidos. La piel responde de manera natural y progresiva mostrando un aspecto terso, tonificado y des congestionado.

MESOBIOLIFT RF

S Y S T E M



TRATAMIENTOS
FACIALES

TRATAMIENTOS
CORPORALES



redensifica

reafirma

redefine



desconggestionona

RÖS'S

Tecnología estética avanzada

TRES POTENTES
ACTIVOS ALIADOS PARA
HACER FRENTE A
PROBLEMAS CONOCIDOS

LA ENERGÍA ENDO-TÉRMICA GENERADA POR MESOBIOLIFT RF RESULTA DE LA FUSIÓN DE RADIOFRECUENCIA Y CORRIENTE CONTINUA. ESTA NUEVA EMISIÓN ES UN POTENTE GENERADOR DE CALOR INTERNO CONTROLADO CON CAPACIDAD PARA INTRODUCIR TRANSDÉRMICAMENTE PRINCIPIOS ACTIVOS EN EL INTERIOR DE LA PIEL.

EL SISTEMA MESOBIOLIFT CONTEMPLA TRES TRATAMIENTOS ESTRELLA:

1. REDENSIFICACIÓN CUTÁNEA FACIAL CON PRINCIPIOS ACTIVOS DE CÉLULA MADRE, SUPREME CELL.
2. REAFIRMACIÓN CORPORAL CON PRINCIPIOS ACTIVOS REAFIRMANTES.
3. DESCONGESTIÓN CORPORAL CON PRINCIPIOS ACTIVOS DESCONGESTIVOS CON BASE DE MENTOL.

TRATAMIENTOS A LA CARTA,
MANEJO INTUITIVO,
RESULTADOS INSUPERABLES

INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

HASTA AHORA LOS TRATAMIENTOS DÉRMICOS SE PROGRAMABAN POR FASES, PRIMERO ESTIMULANDO UNA VASODILATACIÓN Y POSTERIORMENTE PENETRANDO NUTRIENTES HASTA EL INTERIOR DE LA PIEL.


CON MESOBIOLIFT RF LOGRAMOS AMBOS OBJETIVOS EN EL MISMO MOMENTO. ESTE NUEVO SISTEMA ACTÚA DE MANERA SINCRONIZADA DESDE LA SUPERFICIE Y DESDE EL INTERIOR DE LA PIEL CON EL OBJETIVO DE ACCIONAR LOS ENGRANAJES QUE POTENCIAN LA REGENERACIÓN CELULAR.

EL RETO TECNOLÓGICO DEL SISTEMA MESOBIOLIFT,
LA SINCRONIZACIÓN DE ENERGÍAS.

La creación de una sola onda endo-térmica capaz de sincronizar dos acciones con funciones complementarias, ha sido el reto del departamento de investigación y desarrollo.

El sistema Mesobiolift es el resultado de esta innovación. Un método eficaz que multiplica las posibilidades de tratamientos faciales y corporales, a la vez que reduce los tiempos de aplicación.

La tecnología de MESOBIOLIFT RF está diseñada con la delicadeza de nuestro equipo de asesoras y con la practicidad de nuestros ingenieros. Fruto de ello, nace un equipo intuitivo y versátil, extremadamente cuidadoso con la piel, pero potente en sus resultados.

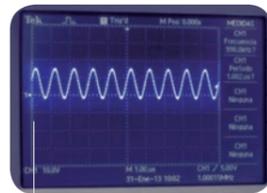


Onda endo-térmica, generadora de calor y vehículo óptimo para transportar principios activos al interior de la piel. Su intensidad es regulable según el tratamiento requerido.

LA TECNOLOGÍA ESTÉTICA QUE PRESTA
LA MÁXIMA ATENCIÓN A LA NATURALEZA
DE LA PIEL


Tratamos la piel, distintivo de belleza y salud, con el máximo cuidado y profesionalidad. Los tejidos de la dermis perciben la **energía endo-térmica** con diferente intensidad, según su capacidad de absorción.

Los de mayor resistencia al paso de la energía tienden a calentarse con mayor rapidez y más intensamente que los tejidos que presentan menor resistencia al paso de energía.

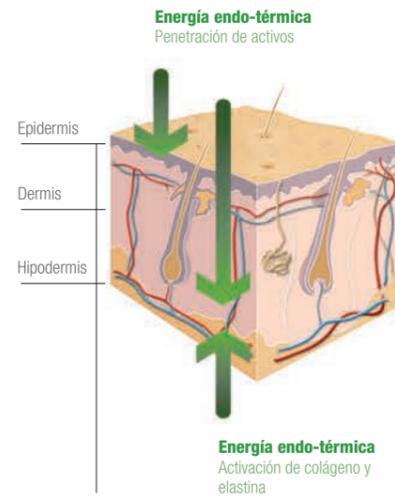

La energía actúa homogéneamente en todos los estratos de la piel

APLICADORES PENSADOS CON UN DOBLE
OBJETIVO, GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA
PIEL Y FACILITAR EL TRABAJO PROFESIONAL

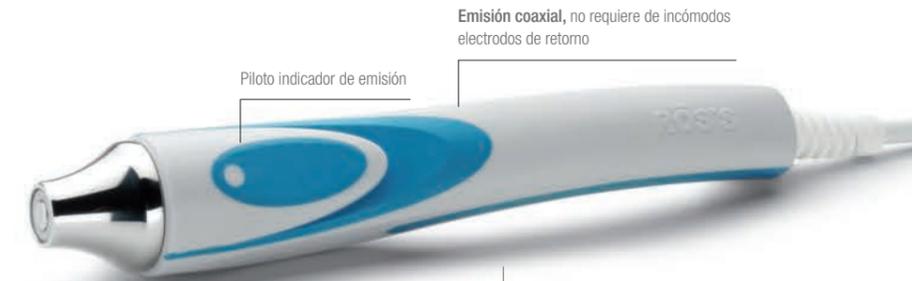

Emisión coaxial, no requiere de incómodos electrodos de retorno

Piloto indicador de emisión

Diseño ergonómico. Disparo de energía por pedal para manipular el aplicador libremente

Emisión bipolar resistiva, emisión controlada y selectiva de energía

El protocolo de tratamiento MESOBIOLIFT RF ha sido diseñado bajo supervisión médica, teniendo en cuenta todas las variables que influyen en la correcta estimulación de la piel, según la zona y el tratamiento seleccionado.

Este método de trabajo previene de agresiones innecesarias a la piel, preparándola progresivamente para recibir la energía que puede tolerar.


Protocolo profesional

FASE I	Barrido de 1MHz a 3MHz	Preparador cutáneo	Controla el aumento progresivo de temperatura en la piel. Mantiene estimuladas y receptoras todas las capas cutáneas.
FASE II	Señal endo-térmica	Activador celular	Tratamiento en sinergia de RF e introducción de principios activos.
FASE III	Radiofrecuencia	Potenciador de eficacia	Activador circulatorio para potenciar el aprovechamiento de principios activos.

Programas específicos para cada tratamiento

MESOBIOLIFT RF acerca al máximo el protocolo de tratamiento a las necesidades de la piel de cada persona. Seleccione parámetros según diagnóstico de la piel, escoja el aplicador y siga el protocolo indicado por el software inteligente. La aplicación es muy intuitiva y se adecua a cada necesidad.

El equipo dispone de dos aplicadores de energía para tratamientos faciales y uno para tratamientos corporales.

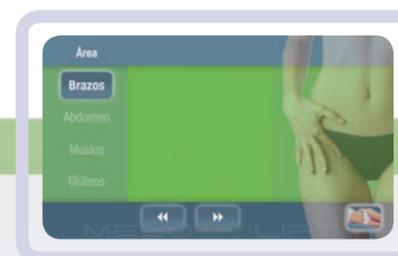

TRATAMIENTOS FACIALES

Con el paso del tiempo, la renovación celular de los tejidos se ralentiza y la piel pierde elasticidad debido a que las fibras encargadas de su recuperación, colágeno y elastina entre otros, se debilitan. La dermis, especialmente la del rostro y escote, se vuelve más fina y tienden a aparecer pliegues.

En tratamientos faciales, la resistencia que ofrecen los tejidos al paso de corriente, provoca el incremento controlado de la temperatura tisular en dermis, dejando intacta la epidermis. Este aumento endotérmico conlleva una doble consecuencia:

1. Activación inmediata de la circulación sanguínea **Recepción de principios activos de Supreme Cell y accionado de la neogénesis celular**
2. Contracción de las fibras de colágeno **Efecto inmediato: tensado de fibras de colágeno del tejido subcutáneo**
Efecto progresivo: formación de nuevas fibras elásticas

RECONSTRUCCIÓN DE LA RED BIO-REDENSIFICADORA DE SUJECCIÓN DÉRMICA

REAFIRMACIÓN, REMODELACIÓN DE ÓVALO, MEJORA DEL TONO ELÁSTICO GENERAL, MEJORA LÍNEAS DE EXPRESIÓN



Cuello y mentón



Líneas orbitales



Surcos nasogenianos

TRATAMIENTOS CORPORALES

La radiofrecuencia induce la proliferación de fibroblastos dérmicos y activa el sistema arteriovenoso en los tejidos, mejorando notablemente la flacidez de zonas difíciles como cara interna de muslos y brazos. Además, impulsa un estímulo circulatorio que mejora la oxigenación y el drenaje de la piel.

Con el sistema Mesobiolift aplicamos radiofrecuencia de 1Mhz y mesoterapia virtual en un solo gesto. Los principios activos que apliquemos incrementan los resultados de nuestros tratamientos.

Protocolos profesionales:

TRATAMIENTO REAFIRMANTE

Revitalización y regeneración cutánea.

1. Barrido de 1Mhz a 3Mhz **Preparación cutánea.**
2. Señal endotérmica **Introducción de principios activos reafirmantes.**
3. Radiofrecuencia de 1Mhz **Activador circulatorio y potenciador de eficacia.**

TRATAMIENTO DESCONGESTIVO

Reactivación de irrigación sanguínea.

1. Radiofrecuencia de 1Mhz **Termoterapia intensa sobre tejidos con acción vasodilatante.**
2. Corriente continua **Penetración de principios activos descongestivos con base de mentol. Acción vasoconstrictora.**



Glúteos



Abdomen



Brazos

EMULSIONES CONDUCTORAS RÖS'S PARA SEÑAL ENDO-TÉRMICA

Estudios científicos demuestran que la emisión electromagnética de la RF tiene un efecto directo sobre las células de la piel y, más específicamente, sobre las células madre orgánicas, presentes en todos los estratos tisulares.

La onda endo-térmica por sí misma estimula la regeneración celular, pero además el intercambio iónico que provoca, favorece la permeabilidad de su membrana, lo que hace que la introducción de principios activos sea mucho más fácil.

RÖS'S presenta una gama de emulsiones para señal endo-térmica enriquecidas con los principios activos vegetales.



Supreme CELL

Emulsión enriquecida con células madre extraídas del núcleo del argán, reconocido regenerador. Activa la neogénesis de las células de la piel, ayudando en la reconstrucción de la red que sujeta nuestro tejido cutáneo. Óptimo para pieles desvitalizadas por la carencia de nutrientes o con signos de envejecimiento.

Emulsión reafirmante RF

Emulsión enriquecida con *cola de caballo*, extracto de *lúpulo*, *hiedra*, *hamamelis* y *colágeno*, un compuesto vegetal para tratar eficazmente la pérdida de elasticidad de la piel, fortalecer el tejido conjuntivo y favorecer el drenaje de los tejidos.



Emulsión descongestiva IM

Emulsión enriquecida con *menthol* y *calmosensine*. El menthol es un concentrado extraído a partir de especies de la menta con acción antiinflamatoria, antiséptica y vasoconstrictora. El calmosensine es un péptido calmante que favorece la relajación.





RÖS'S Estética es fabricante europeo de tecnología estética profesional desde 1978. Su misión es compartir con I@s profesionales de la belleza las soluciones más innovadoras y eficientes en aparatología estética. Los objetivos de nuestra marca son aportar valor y ofrecer servicio continuado.

Ponemos a tu disposición todos nuestros valores:

- | Formación y reciclajes
- | Asesoramiento estético
- | Equipamiento para la promoción comercial
- | Garantía de fabricación europea
- | Servicio post-venta

En RÖS'S estamos al lado del emprendedor@ para acompañarle en su crecimiento. Todo el equipo de profesionales, departamento médico-estético, comercial, marketing y técnico se encuentra a su disposición.

RÖS'S, calidad y servicio

MESOBIO LIFT RF		Ref. 0028480
DIMENSIONES	Ancho	590 mm
	Alto sin pie	112 mm
	Fondo	560 mm
	Peso	19 kg
Pie Beta incluido	REF.0077220	790x450 mm
FRECUENCIA		1/3MHz
MODO		Continuo
POTENCIA APLICADOR		40 W

CÓDIGO	ACCESORIO	CANTIDAD
04RF000	Aplicador específico	1
04RF010	Aplicador facial	1
04RF020	Aplicador corporal	1
0401700	Pedal Din-5 rosca	1
6600092	SUPREME Cell 500ml	1
6600100	Emulsión Reafirmante RF 1.000ml	1
6600110	Emulsión Descongestiva IM 1.000ml	1



RÖS'S ESTETICA, Molinot, 46-48 · 08860 Castelldefels (Barcelona) · email:ross@ross.es · TEL. (34) 93 4266017 · www.ross.es

RÖS'S

Tecnología estética avanzada

